


Att låna elrullstol

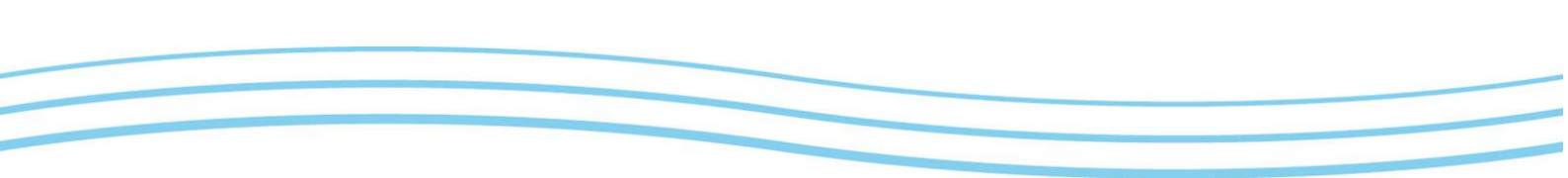

Elrullstolen gör att du kan röra dig friare – men att köra en elrullstol är också förenat med ansvar och vissa risker. Du måste kunna köra elrullstolen utan att utsätta dig själv eller andra för onödiga risker innan du ger dig ut i trafiken. Genom att underhålla din elrullstol på ett riktigt sätt minskar du också risken för driftstopp. För din egen och för andras skull – läs Att låna elrullstol!

Ditt Ansvar

- Du får **låna** elrullstolen som ett personligt hjälpmedel.
- Det är Hjälpmedel Västernorrland som äger elrullstolen.
- Du ska lämna tillbaka elrullstolen till Hjälpmedel Västernorrland när behovet upphör.
- Du är skyldig att se till att utrustningen på elrullstolen fungerar.
- Du är som vägtrafikanter skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter dem.

Elrullstolen är individuellt utprovad efter dina behov och får därmed inte lånas ut eller överlåtas till någon annan.

Ditt lån av elrullstolen är registrerat hos vårdgivaren.

Förskrivare är den person inom hälso- och sjukvården som ansvarar för bedömning, utprovning och uppföljning. Förskrivaren har rätt att göra en förnyad bedömning av dina hjälpmedelsbehov, till exempel om din sjukdomsbild eller dina bostadsförhållanden förändras eller om du inte använder ditt hjälpmedel som det var avsett.

En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren tar tillbaka eller byter ut hjälpmedel.

Vid fel och frågor angående den lånade elrullstolen kontakta Hjälpmedel Västernorrland via telefon: 060-14 96 30

Försäkring

- Hjälpmedelscentralen ersätter inte personskada, skada på djur eller skada på annan egendom.
- Kontrollera att din hem-, liv- eller olycksfallsförsäkring täcker och skyddar om något skulle inträffa vid framförandet av elrullstolen. Vid behov komplettera din försäkring.

CE-märkning

CE-märkning av stolen innebär att tillverkaren försäkrar att elrullstolen uppfyller kraven på säkerhet enligt EGs medicintekniska direktiv. Tillverkaren tar ansvaret förutsatt att elrullstolen används, utrustas och underhålls enligt dennes anvisningar.

Du får **inte** göra tekniska ändringar själv på elrullstolen eftersom tillverkaren och/eller hjälpmedelsverksamheten då inte längre ansvarar för att elrullstolen är säker.

Förvaring av elrullstol utomhus

Låt elrullstolen stå skyddad när den inte används. Även om den är tillverkad för utomhusanvändning tål den inte att stå ute i ur och skur utan skydd.

Tänk också på att en elrullstol kan vara en "rolig leksak" för andra. Se till att den inte kan stjälas eller lånas av obehöriga.

Elrullstolen ska förvaras i låsbart, skyddat utrymme som ej är våtutrymme, till exempel gemensamma förråd. Temperaturen får inte understiga +5°.

Att framföra elrullstol

Det finns en viss olycksrisk när man kör elrullstol oavsett om man tränar att köra eller om man är en van elrullstolsanvändare. Detta gäller främst när man kör fortare än gånghastighet (5-6 km per timme) och betraktas som cyklist.

Det är viktigt att du lär dig hur elrullstolen fungerar i olika situationer. Tänk på att elrullstolen är ett litet fordon som inte alltid syns från en bil.

OBS! Lär dig hur långt en batteriladdning räcker. Körsträckan kan variera beroende på backar, start och stopp, kyla, ojämn mark eller liknande. Även lufttrycket i däcken påverkar körsträckan.

Kör i början bara där du kan få hjälp om laddningen inte räcker.

Trafikregler

Du är som vägtrafikanter skyldig att känna till trafikreglerna och rätta dig efter dem.

Det innebär bland annat att:

- Du ska uppträda så att du inte i onödan stör eller hindrar trafiken.
- Du ska följa alla trafikanvisningar (vägmärken, trafikmärken, trafiksignaler, gällande regler mm)
- Du får inte köra elrullstol om du är påverkad av till exempel alkohol, droger eller medicin.

Att köra med elrullstol i trafiken

Gångtrafikanter: Du räknas som gångtrafikanter när du har lägre hastighet än 5-6 km i timmen. Du ska då följa samma regler som en gångtrafikanter. Det bästa och säkraste sättet att ta sig fram är att köra på trottoaren och använda övergångsställen.

Cyklist: Du räknas som cyklist om du kör fortare än 5 – 6 km i timmen. Du ska då följa samma regler som en cyklist. Du ska använda cykelbanan och om cykelbana saknas ska du köra på vägbanan så långt till höger som möjligt. Om det finns cykelbanor på båda sidor om vägen ska du köra på den högra sidan räknat i din färdriktning.

Övrigt:

- Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
- Du får inte köra i bredd med annan rullstol eller cykel.
- Du ska i god tid ge tecken med körriktningsvisaren när du kör ut från kanten, svänger eller ska vända.

Skötsel och underhåll

Däck

Elrullstolens däck ska vara ordentligt pumpade. Följ rekommenderat lufttryck enligt bruksanvisningen. Kontrollera att det finns däckmönster kvar. Om inte kontakta Hjälpmedel Västernorrland telefon 060-14 96 30.

Batterier

För att elrullstolen ska fungera bra måste batterierna laddas regelbundet. Låt alltid elrullstolen stå på laddning när den inte används.

- Du ska ladda och förvara elrullstolen i överenskommet utrymme.
- Du ska ha huvudströmbrytaren avslagen vid laddning.
- Du ska vid laddning först ansluta batteriladdarens kontakt i elrullstolen och därefter batteriladdarens kontakt till vägguttaget.
- Du ska vid avslut av laddning först ta ur väggkontakten och därefter anslutningen till elrullstolen.
- Du ska ladda elrullstolens batterier med den batteriladdare som medföljer vid leverans.

Bromsar

Alla elrullstolar har bromsar med "död mans grepp". Det innebär att elrullstolen stannar automatiskt så fort manöverspaken eller "gaspådraget" släpps. Kontrollera bromsarna varje dag genom att köra en kort sträcka och släppa gasen. Var försiktig då det kan vara förenat med en viss fara.

Belysning

Kontrollera belysningen fram och bak innan du ger dig ut med elrullstolen.

Last

Elrullstolar kan vara byggda olika för att klara att köra dig och en mindre last. Se leverantörens bruksanvisning vad som gäller för den elrullstol du använder.

Transport

Generellt gäller att det alltid är säkrare att sitta i ett säte i t.ex. bussen än att sitta i elrullstolen. Flytta därför om möjligt över i ett säte. Sitter du kvar i elrullstolen, slå av elrullstolens strömförsörjning under transporten och ha parkeringsbromsen aktiverad. Använd alltid säkerhetsbälte.

Transport i fordon: Vid transport av elrullstol i fordon är det av säkerhetsskäl viktigt att elrullstolen är ordentligt förankrad. Elrullstolen har öglor eller är märkta på de ställen där förankringen ska ske. Elrullstolen ska placeras framåt eller bakåt i färdriktningen.

Allmänna kommunikationer: Vid resa med allmänna kommunikationer (flyg, tåg, buss, färdtjänst, riksfärdtjänst, taxi mm) kontakta aktuellt bolag för att få information om vad som gäller kring att ta med elrullstol och övriga hjälpmedel du är i behov av. Det är bra att du är förberedd med mått och vikt på hjälpmedlen.

Transport av elrullstol: Om elrullstolen inte kan transporteras inne i ett fordon måste den ställas på en släpvagn. Släpvagnen bör ha ett kapell för att skydda elrullstolen mot regn och smuts. Vid alla transporter ska batterier och elrullstol vara väl fästa.

Noteringar:

